


rollz[®] flex umbrella

Paraguas Rollz Flex Manual de montaje y manipulación

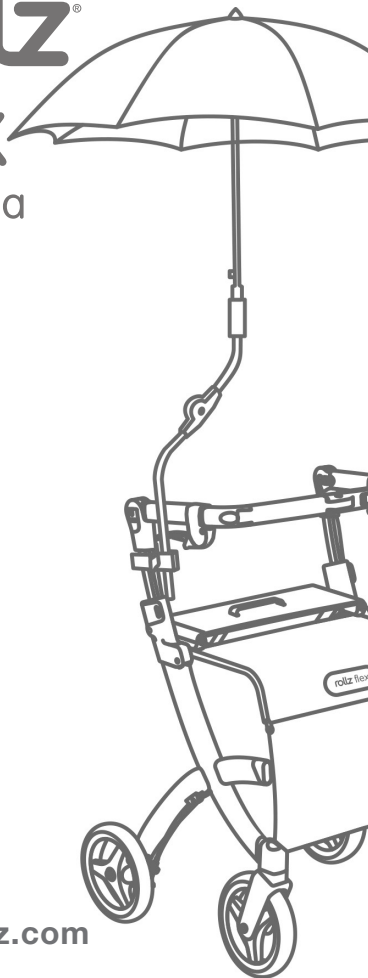

www.rollz.com

Lea este manual de montaje y manipulación antes instalación del producto


Introducción

Gracias y enhorabuena por la compra del Rollz Paraguas flexible, un producto original de MPB (de Bielefeld, Alemania).

Antes de instalar el paraguas del andador, lea el ensamblaje y manual de manejo y tenga en cuenta todas las instrucciones de seguridad. Cuando se ha completado el montaje del paraguas, puede comenzar. disfrutando de la mejor calidad y fácil manejo de este original Producto MPB.

Todos los paraguas con andador MPB ofrecen protección contra la lluvia y el sol, ya que bloquear la dañina radiación ultravioleta casi completamente. El sistema Air Vent-patentado garantiza estabilidad en tiempo ventoso.

Debido a la ubicación que ahorra espacio en el lado derecho (generalmente) puede usar su andador con ambas manos.

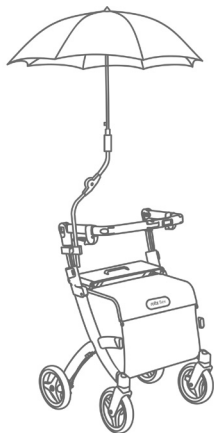

Contenido del paquete

En el paquete encontrarás:

- un paraguas con andador con articulación ajustable y cubierta (figura 1);
- la abrazadera de montaje premontada para Rollz Flex (figura 2);
- una llave Allen para una fácil instalación del paraguas Rollz Flex.

ADVERTENCIA



¡Las bolsas de plástico pueden ser peligrosas!
Para evitar asfixia, mantenga la bolsa de plástico del embalaje lejos de los bebés y niños.



Figura 1: Paraguas con articulación ajustable y botón de desbloqueo, incluida la funda.

Montaje en el andador

La abrazadera de montaje está preensamblada para montar en el lado derecho (cuando está detrás del andador) de su Rollz Flex. Si prefiere montarlo en el lado izquierdo, lea el párrafo ‘montaje en el lado izquierdo’.

La abrazadera consta de dos partes. Primero coloque la parte del andador en el marco de su Rollz Flex. Luego sujete el paraguas a la parte del paraguas. Descubra cómo montarlo en las páginas siguientes.



Figura 2: Abrazadera de montaje preensamblada para Rollz Flex paraguas y una llave Allen.



Figura 3: Todas las piezas necesarias para colocar el paraguas en el Andador Rollz Flex.



Figura 4: La abrazadera de montaje debe colocarse en el marco de su Rollz Flex lo más alto posible.

El montaje es el siguiente:

- Asegúrese de no perder el pequeño anillo espaciador premontado X colocado entre las abrazaderas de la abrazadera de montaje. Eso siempre debe permanecer en el tornillo Allen largo con cabeza plana.
- Fije la abrazadera de montaje lo más alto posible en el marco, con ayuda de la llave Allen (figura 4). La tuerca de mariposa de plástico debe apuntar hacia afuera.
- Apriete los tornillos firmemente.
- Ahora puede colocar el poste del paraguas en la abrazadera del paraguas desde arriba y apriete la tuerca de mariposa de plástico (figura 4).
- Uno de los dos anillos de ajuste Y (figura 5) se puede colocar en el poste del paraguas para colocar el paraguas en la posición deseada altura. Puede elegir entre un máximo de tres alturas.
- La distancia entre la punta del paraguas y el suelo debe ser de al menos 3-5 cm cuando el paraguas está doblado.
- Coloque el segundo anillo de ajuste Y debajo del soporte abrazadera. Esto asegura su paraguas en la parte inferior.
- Apriete los tornillos nuevamente después de dos días.

Figura 5: Colocación del anillo de ajuste Y.



Montaje en el lado derecho

La abrazadera de montaje está preensamblada para encajar al lado derecho del marco. La posición de los orificios de ajuste no se deben cambiar.

La parte del paraguas de la abrazadera (con la tuerca de mariposa de plástico) está premontada en el soporte de montaje de la siguiente manera:

- Un tornillo en el agujero cuadrado **h**;
- Un tornillo Allen en el orificio **a**.



Figura 6: Rollz Flex paraguas en el montaje abrazadera.

Y así es como se puede montar la abrazadera de montaje para el lado derecho de su Rollz Flex.

Montaje en el lado izquierdo

¿Prefieres colocar el paraguas al lado izquierdo? Luego use el agujero **e** en el soporte de montaje (figura 7). Asegúrese de que el espaciador pequeño el anillo **X** se coloca entre las dos abrazaderas de la parte del paraguas, alrededor el tornillo Allen largo (como se muestra en figuras 2 y 3).

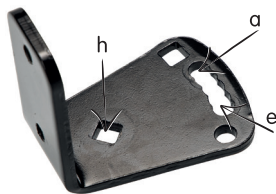


Figura 7: Montaje soporte (parte de la abrazadera)

Manual de manejo del paraguas con andador

Gracias al tubo largo ajustable, el paraguas puede ser usado por personas con alturas de hasta 200 cm.

Cuando no se usa el paraguas, puede permanecer unido al marco. El botón de bloqueo permitirá plegar el paraguas, con la punta apuntando hacia abajo (figura 6). No configure el manillar del Rollz Flex demasiado bajo cuando el paraguas está colocado en el marco. Debe haber 3-5 cm entre los suelos y la punta del paraguas.



Figura 8: El botón de bloqueo ayuda a ajustar el tubo.



Figura 9: Coloque el paraguas en la posición deseada.




Figura 10: Protege del sol y lluvia.


INSTRUCCIONES

Le recomendamos que practique abriendo y cerrando el paraguas antes de usarlo por primera vez.

- ¿Quieres abrir el paraguas? Entonces asegúrate de primero quitar su tapa.
- Pulsando el botón de bloqueo gris en la junta de ajuste (figura 8) puede cambiar la posición del paraguas y colóquelo sobre el deseado (figura 9).
- Al apretar la tuerca de mariposa de plástico de forma ergonómica puede evitar fácilmente que el paraguas se retuerza y gire.
- Una vez que se hayan completado todos los pasos anteriores, abra el dos correas de velcro en el paraguas.
- Pulsa el botón de apertura del paraguas.

 ¡Atención! El paraguas se abre muy rápido y tiene una amplia toldo para sombrilla: guarde las instrucciones de seguridad.

- Si usó el paraguas bajo la lluvia, asegúrese de dejarlo secar antes guardarlo. Siga las instrucciones anteriores al revés para cerrar el paraguas cuando esté completamente seco.

 ¡Atención! Tenga cuidado de no pillarse los dedos entre las bisagras.

Advertencias, consejos e instrucciones de seguridad

ADVERTENCIAS



- El viento puede apoderarse de cualquier paraguas. Si hace viento afuera entonces es posible que no desee abrir el paraguas. Además, si tu tiene la sensación de que el paraguas desplegado tiene un efecto negativo al conducir con el andador, entonces debe doblarlo (como mostrado en la figura 6). Solo así accidentes y lesiones puede ser evitados.
- El paraguas se abre muy rápido al empujar el botón de apertura. Mantenga el paraguas alejado de su cuerpo. Además, preste atención a otras personas cercanas para evitar accidentes

CONSEJOS

- Tenga en cuenta que cuando el paraguas esté abierto, necesitará más espacio en los lados izquierdo y derecho del andador para no atascarse con las cosas que tiene a su alrededor.
- Además, preste atención a la altura total de su paraguas para que no choques con toldos extendidos, por ejemplo.
- Antes de entrar a un edificio, asegúrese de que el paraguas esté cerrado y plegado.
- Tenga en cuenta que la tela del paraguas puede dañarse setos, cercas, cigarros y arbustos.
- Cuando no utilice el paraguas, proteja su alto tela de calidad cerrando y doblando el paraguas. Asegúralo con los velcros y poner la tapa encima.

- Use la funda solo cuando el paraguas esté completamente seco, para evitar el moho y / o la decoloración del tejido.
- Proteja su paraguas seco con la cubierta suministrada. Evita frotar el paraguas con el manillar y los frenos del Rollz Flex.
- El reemplazo de piezas defectuosas solo se puede hacer con piezas de repuesto MPB originales.
- Este producto no se puede utilizar en condiciones defectuosas.
- Este manual es parte del paraguas MPB de Rollz y debe conservarse para futuras referencias. Al transmitir el producto a terceros, también entregue el manual. Es posible que se produzcan cambios en esta versión del manual.

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD

- Cuando use el producto, siempre asegúrese de tener un campo de visión libre. No obstaculice a otros peatones y usuarios de la carretera.
- El paraguas debe instalarse en el bastidor de manera que no restrinja el mecanismo de plegado del rodador y la función de piezas importantes como los frenos.
- Por razones de seguridad, compruebe regularmente si los tornillos son apretados correctamente.
- Tenga en cuenta el riesgo de que sus dedos se atasquen en el bisagras al plegar el paraguas.
- Tenga en cuenta que cuando tenga un paraguas unido a su andador eres ,más alto‘ y ,más ancho‘.
- Al abrir y cerrar el paraguas existe el riesgo de lesionar a otras personas que caminan cerca de usted.

Garantía

Este producto solo se puede devolver cuando se adjunta el comprobante de compra. Póngase en contacto con su distribuidor para el procedimiento de devolución. El período de garantía es de 2 años. Los daños mecánicos y los agujeros de quemaduras no están cubiertos.

Contacto

Rollz International siempre está abierto a comentarios y sugerencias, que pueden ser sobre el manejo del producto, el manual u otros aspectos de nuestros productos o servicios. Puede enviar sus consejos o experiencias a info@rollz.com.

Consulta el manual en Holandés www.rollz.nl/rollz-handleidingen/

Consulta el manual en Alemán www.rollz.de/rollz-bediensungsanleitungen/

Consulta el manual en Francés www.rollz.fr/manuels-rollz/



Rollz® International bv
Rotterdamseweg 402M
2629HH Delft
The Netherlands

+31 (0) 20 362 20 10
info@rollz.com
www.rollz.com