


rollz[®] motion umbrella

**Paraguas Rollz Motion
Manual de montaje y
manipulación**

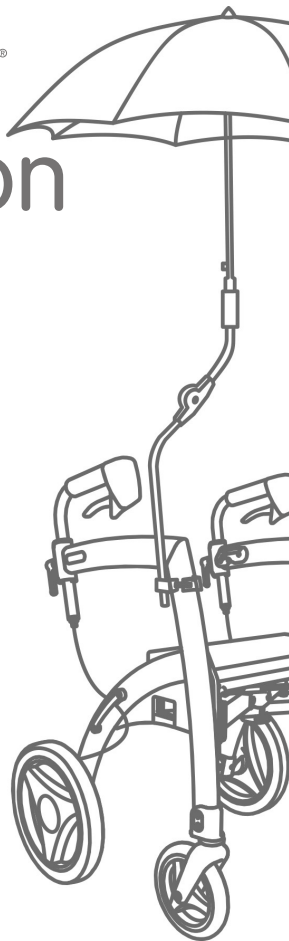

www.rollz.com

**Lea este manual de montaje y manipulación antes
instalación del producto.**

Introducción


Gracias y enhorabuena por la compra del Paraguas Rollz Motion, un producto original de MPB (de Bielefeld, Alemania).

Antes de instalar el paraguas del andador, lea el ensamblaje y manual de manejo y tenga en cuenta todas las instrucciones de seguridad. Cuando se ha completado el montaje del paraguas, puede empieza a disfrutar de la mejor calidad y fácil manejo de este original Producto MPB.

Todos los paraguas con andador MPB ofrecen protección contra la lluvia y el sol, ya que bloquear la dañina radiación ultravioleta casi completamente.

El sistema Air-Vent-patentado garantiza estabilidad en tiempo ventoso.

Debido a la ubicación que ahorra espacio en el lado derecho (generalmente) puede usar su andador con ambas manos.

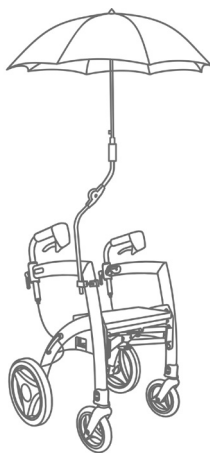

Contenido del paquete

En el paquete encontrarás:

- un paraguas con ruedas con dos articulaciones ajustables y una funda (figura 1);
- la abrazadera de montaje pre montada para Rollz Motion (figura 2);
- una protección de rosca que se puede acortar con un cortar con tijeras;
- una llave Allen para una fácil instalación del paraguas Rollz Motion.

ADVERTENCIA



¡Las bolsas de plástico pueden ser peligrosas!
To avoid suffocation, keep the plastic bag of the packaging away from infants and little children.



Figura 1: Paraguas con dos articulaciones ajustables y desbloqueo botones, incluida la tapa.

Montaje en el andador

La abrazadera de montaje está preensamblada para montar en el lado derecho (cuando está detrás del andador) de su Rollz Flex. Si prefiere montarlo en el lado izquierdo, lea el párrafo ‘montaje en el lado izquierdo’.

La abrazadera consta de dos partes. Primero coloque la parte del andador en el marco de su Rollz Motion. Luego abrocha el paraguas a la parte del paraguas. Descubra cómo montarlo en las próximas páginas.

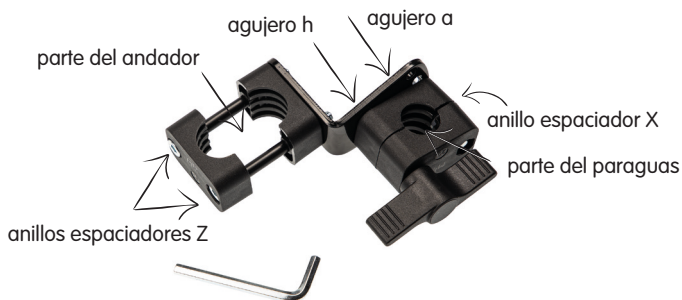


Figura 2: Abrazadera de montaje premontada para Rollz Motion paraguas y una llave Allen.

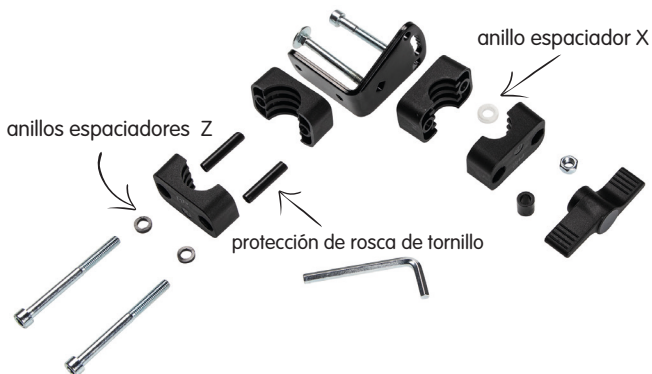


Figura 3: Todas las piezas necesarias para colocar el paraguas en el lado derecho del Rollz Motion.



Figura 4: La abrazadera de montaje debe colocarse en el marco de su Rollz Motion lo más alto posible.

El montaje es el siguiente:

- Asegúrese de no perder el pequeño anillo espaciador premontado Z colocado entre las abrazaderas de la abrazadera de montaje. Eso siempre debe permanecer en el tornillo Allen largo con cabeza plana
- Acorte las protecciones de rosca de tornillo (figura 2 y 3) con unas tijeras. Envuélvalos alrededor de los dos tornillos para proteger marco de su andador.
- Fije la abrazadera de montaje lo más alto posible en el marco, con ayuda de la llave Allen (figura 4). La tuerca de mariposa de plástico debe apuntar hacia afuera.
- Apriete los tornillos firmemente.
- Ahora puede colocar el poste del paraguas en la abrazadera del paraguas desde arriba y apriete la tuerca de mariposa de plástico (figura 4).
- El anillo de ajuste Y (figura 5) se puede colocar en el paraguas poste para colocar el paraguas a la altura deseada. Usted puede elija entre un máximo de tres alturas diferentes.
- Apriete los tornillos nuevamente después de dos días.

Figura 5: Colocación del ajuste pieza Y.



Montaje en el lado derecho

La abrazadera de montaje está preensamblada para encajar en el lado derecho del cuadro. La posición del ajuste los agujeros no deben cambiarse.

La parte del paraguas de la abrazadera (con la tuerca de mariposa de plástico) está premontada en el soporte de montaje de la siguiente manera:

- Un tornillo en el agujero cuadrado **h**;
- Un tornillo Allen en el orificio **a**.



Figura 6: Rollz Motion paraguas en el montaje de la abrazadera.

Y así es como la abrazadera de montaje se puede montar para el lado derecho de su Rollz Motion.

Montaje en el lado izquierdo

¿Prefieres colocar el paraguas en el lado izquierdo?

Use el agujero **e** en el soporte de montaje (figura 7). Asegúrese de que el espaciador pequeño el anillo X se coloca entre las dos abrazaderas de la parte del paraguas, alrededor el tornillo Allen largo (como se muestra en figuras 2 y 3).

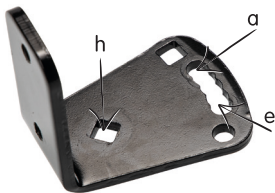


Figura 7: Montaje soporte (parte de la abrazadera).

Manual de manejo del paraguas con andador

Gracias al tubo largo ajustable, se puede utilizar el paraguas por personas con alturas de hasta 200 cm.

Cuando el paraguas es si no se utiliza, puede permanecer unido al marco. El botón de bloqueo permitirá doblar el paraguas, con la punta apuntando hacia abajo (figura 6).



Figura 8: El botón de bloqueo ayuda a ajustar el tubo.



Figura 9: Coloque el paraguas en la posición deseada.



Figura 10: Protege del sol y lluvia.

INSTRUCCIONES

Le recomendamos que practique abriendo y cerrando el paraguas antes de usarlo por primera vez.

- Al apretar la tuerca de mariposa de plástico de forma ergonómica puede evitar fácilmente que el paraguas se retuerza y gire.
- ¿Quieres abrir el paraguas? Entonces asegúrate de primero quitar su tapa.
- Pulsando el botón de bloqueo gris en la junta de ajuste (figura 8) puede cambiar la posición del paraguas y colóquelo sobre el deseado (figura 9).
- Una vez que se hayan completado todos los pasos anteriores, abra el dos correas de velcro en el paraguas.
- Pulsa el botón de apertura del paraguas.

- ⚠ ¡Atención! El paraguas se abre muy rápido y tiene un amplio toldo para sombrilla: guarde las instrucciones de seguridad.
- Si usó el paraguas bajo la lluvia, asegúrese de dejarlo secar antes de guardarlo. Siga las instrucciones anteriores al revés para cerrar el paraguas cuando esté completamente seco.

- ⚠ ¡Atención! Tenga cuidado de no pillarse los dedos entre las bisagras.

Advertencias, consejos e instrucciones de seguridad

ADVERTENCIAS



- El viento puede apoderarse de cualquier paraguas. Si hace viento entonces es posible que no desee abrir el paraguas. Además, si usted tiene la sensación de que el paraguas desplegado tiene un efecto negativo al conducir con el andador, entonces debe doblarlo (como se muestra en la figura 6). Solo así los accidentes y lesiones pueden ser evitados.
- El paraguas se abre muy rápido al empujar el botón de apertura. Mantenga el paraguas alejado de su cuerpo. Además, preste atención a otras personas cercanas para evitar accidentes

CONSEJOS

- Tenga en cuenta que cuando el paraguas esté abierto, necesitará más espacio en los lados izquierdo y derecho del andador para no atascarse con las cosas que pueda tener alrededor.
- Además, preste atención a la altura total de su paraguas para que no choques con toldos extendidos, por ejemplo.
- Antes de entrar a un edificio, asegúrese de que el paraguas esté cerrado y plegado.
- Tenga en cuenta que la tela del paraguas puede dañarse con setos, cercas, cigarras y arbustos.
- Cuando no utilice el paraguas, proteja su tejido de alta calidad cerrando y doblando el paraguas. Asegúrelo con velcros y cúbralo con la funda.

- Use la funda solo cuando el paraguas esté completamente seco, para evitar el moho y / o la decoloración del tejido.
- Proteja su paraguas seco con la funda suministrada. Evitar frotando el paraguas contra el manillar y los frenos del Rollz Motion.
- La sustitución de piezas defectuosas solo se puede realizar con repuestos originales MPB.
- Este producto no se puede utilizar en estado defectuoso.
- Este manual es parte del paraguas Rollz MPB y debe ser guardado para referencia futura. Al pasar el producto a terceros, entregue también el manual. Cambios a esta versión podría ocurrir.

LAS INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD

- Cuando use el producto, siempre asegúrese de tener un campo de visión libre. No obstaculice a otros peatones y usuarios de la carretera.
- El paraguas debe instalarse en el bastidor de manera que no restrinja el mecanismo de plegado del rodador y la función de piezas importantes como los frenos.
- Por motivos de seguridad, compruebe periódicamente si los tornillos están bien apretados
- Tenga en cuenta el riesgo de que sus dedos se atasquen en las bisagras al plegar el paraguas.
- Tenga en cuenta que cuando tenga un paraguas adjunto a su andador eres ,más alto' y ,más ancho'.
- Al abrir y cerrar el paraguas existe el riesgo de herir a otras personas que caminan cerca de usted.

Garantía

Este producto solo se puede devolver cuando se adjunta el comprobante de compra. Póngase en contacto con su distribuidor para el procedimiento de devolución. El período de garantía es de 2 años. Los daños mecánicos y los agujeros de quemaduras no están cubiertos.

Contacto

Rollz International siempre está abierto a comentarios y sugerencias, que pueden ser sobre el manejo del producto, el manual u otros aspectos de nuestros productos o servicios. Usted puede enviar sus consejos o experiencias a info@rollz.com.

Consulte el manual en holandés en www.rollz.com/rollz-manuals

Lea las instrucciones de funcionamiento en www.rollz.com/de/rollz-betriebsanleitungen/

Consulte el manual en francés en www.rollz.com/fr/manuels-rollz



Rollz® International bv
Rotterdamseweg 402M
2629HH Delft
Los países bajos

+31 (0) 20 362 20 10
info@rollz.com
www.rollz.com